

VAROVÁNÍ:

Kontaktní čočky jsou opakovaně použitelné zdravotnické prostředky určené pro použití u jednoho pacienta.

Vydává je oční lékař, který musí uživatele seznámit s jejich používáním a vysvětlit mu, jak je správně používat.

Problémy spojené s nošením kontaktních čoček a používáním přípravků na jejich péči mohou způsobit vážné poškození očí. Je proto nezbytné dodržovat pokyny lékaře a informace uvedené v příbalových letácích dodávaných spolu s kontaktními čočkami a přípravky na jejich péči.

Lékař musí uživatele seznámit s následujícími pokyny k nošení:

- Měkké kontaktní čočky Precilens jsou určeny k nošení během dne a neměly by se nosit během spánku.
- Po použití a před dalším použitím je nutné kontaktní čočky vyjmout, vyčistit a dezinfikovat pomocí čistících prostředků doporučených vaším očním lékařem.
- Je nezbytné dodržovat všechny návštěvy stanovené vaším očním lékařem, protože jsou klíčové pro sledování a úpravu vašich kontaktních čoček.
- Nikdy nedovolte, aby se kontaktní čočky dostaly do styku s vodou z vodovodu.
- Nikdy nenoste kontaktní čočky ve vaně nebo ve sprše, ani při plavání v bazénu nebo v moři.
- Nenoste kontaktní čočky, pokud hrozí vystavení nebezpečným nebo dráždivým výparům.
- Pokud pocítíte bolest očí, nadměrné slzení, zhoršení ostrosti vidění nebo zarudnutí očí, je nutné kontaktní čočky vyjmout a neprodleně vyhledat pomoc očního lékaře.

INDIKACE:

Měkké kontaktní čočky jsou určeny k dennímu nošení, vyměňují se každé tři měsíce nebo jednou ročně a slouží ke korekci krátkozrakosti, dalekozrakosti, astigmatismu a presbyopie u pacientů se zdravou rohovkou.

Kontaktní čočky jsou vhodné pro všechny typy pacientů, pokud si uvědomují, že jejich nošení je podobné jako nošení brýlí, ale že někdy může být obtížné zvyknout si na jejich nošení.

Pro nošení kontaktních čoček neplatí žádné věkové omezení a běžně se předepisují mladým osobám trpícím krátkozrakostí již od 10 let. Nošení kontaktních čoček u dětí vyžaduje pravidelné kontroly.

VÝHODY A KLINICKÁ ÚČINNOST:

Klinická účinnost:

Měkké kontaktní čočky korigují všechny běžné refrakční vady (krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus, presbyopie). Jelikož měkké kontaktní čočky přiléhají k povrchu ve střední části rohovky, je slzný film v této oblasti tenký a rovnoměrný, takže neposkytuje žádnou optickou sílu. Speciální forma čoček pro krátkozrakost využívá optický gradient k vytvoření rozostření v okrajové části sítnice, což reguluje prodlužování osové délky oka a zpomaluje progresi krátkozrakosti.

Klinický přínos:

- Zlepšení ostrosti vidění a zorného pole
- Optická korekce běžných očních vad (krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus, presbyopie)
- Omezení progresu krátkozrakosti pomocí designu čoček pro krátkozrakost u dětí a mladých krátkozrakých osob do 20 let.

DOPORUČENÁ VÝMĚNA:

Každé tři měsíce nebo jednou za rok, v závislosti na typu čoček.

DENNÍ DOBA NOŠENÍ:

Délku denního nošení čoček musí stanovit oční lékař.

Při prvním nošení se doporučuje tuto dobu postupně prodlužovat.

Po období adaptace se denní doba nošení čoček může pohybovat v rozmezí 10 až 15 hodin denně.

Seznam měkkých kontaktních čoček Precilens, včetně údajů o účincích, možných materiálech, cílové skupině a doporučených intervalech výměny, získáte naskenováním níže uvedeného QR kódu:



BALENÍ:

Čočky jsou baleny ve sterilní lahvičce s fyziologickým roztokem. Lahvička je chráněna proti neoprávněné manipulaci až do prvního otevření. Pokud je obal poškozený, čočka se nesmí používat.

045 €

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Aktualizace červenec 2024

PRECILENS - 25 rue Auguste Perret - 94000 CRETEIL - France

Precilens

L'INNOVATION VISUELLE SUR MESURE

Návod k použití měkkých kontaktních čoček Precilens

TENTO PŘÍBALOVÝ LETÁK OBSAHUJE DŮLEŽITÉ INFORMACE, SE KTERÝMI BY MĚLI BÝT OČNÍ LÉKAŘI ŘÁDNĚ SEZNÁMENI A KTERÉ BY MĚLI PŘEDAT UŽIVATELŮM ČOČEK. PŘEČTĚTE SI JE A USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ POUŽITÍ V BUDOUCNU.

Verze v ostatních jazycích jsou ke stažení na stránkách www.precilens.com (QR kód níže)

Distributoři čoček Precilens jsou povinni tento leták vytisknout ve svém jazyce a přiložit jej k dodávaným čočkám.

Také oční lékaři jsou povinni předat tuto příbalovou informaci uživateli.







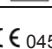



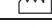


Verze v ostatních jazycích jsou ke stažení na stránkách www.precilens.com (QR kód níže)

Distributoři kontaktních čoček Precilens jsou povinni tento příbalový leták vytisknout ve svém jazyce a přiložit jej k dodávaným čočkám.

Také oční lékaři jsou povinni předat tuto příbalovou informaci uživateli.



Popis symbolů použitých na štítku:

	Zdravotnický prostředek
	Jeden pacient, více použití
	Název čočky
	Sériové číslo
	Kód UDI (Unique Device Identification): jedinečný identifikátor prostředku
	Číslo modelu
	Soulad s evropskými požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a číslo certifikačního orgánu
	Spotřebujte do (datum expirace sterilního prostředku)
	Sterilizace párou
	Systém sterilní bariéry
	Datum výroby
	Nepoužívejte, pokud je obal poškozený
	Viz příbalový leták

VLOŽENÍ ČOČKY:

Před prvním použitím důrazně doporučujeme provést cyklus čištění.

Vkládání (stejně jako vyjímání) je nutné provádět na rovném, čistém a dobře osvětleném povrchu.

Před každou manipulací je nutné si umýt ruce, opláchnout je a poté osušit čistým hadříkem, který nepouští vlákna.

- Nikdy nepoužívejte k vyjímání čoček z pouzdra pinzety ani jiné nástroje.
- Pokud musíte s čočkami manipulovat nad umyvadlem, ujistěte se, že je odtokový otvor zablokovaný.
- Aby nedocházelo k záměně pravé a levé čočky, doporučujeme vždy postupovat ve stejném pořadí: například nejprve pravá čočka, poté levá čočka.
- Doporučuje se nasadit si kontaktní čočky po ranní péči o pleť, ještě před nanesením make-upu, a vyjmout je před večerní péčí o pleť a odličněním.
- Umístěte čočku na ukazováček.
- Pomocí prostředníčku rozevřete víčko.
- Umístěte čočku na oko (obr. 1). Tento postup zopakujte u druhého oka.

VYJMUTÍ ČOČKY:

- Dívejte se směrem nahoru a pomocí prostředníčku stáhněte dolní víčko dolů.
- Opatrně vyjměte čočku z oka pomocí konce ukazováčku a palce (obr. 2).
- Stejný postup zopakujte u levé čočky.



DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY PRO PÉČI O ČOČKY:

Roztok na bázi peroxidu vodíku pro každodenní dezinfekci, případně univerzální roztok pro měkké kontaktní čočky.

Tablety s enzymy na odstraňování proteinů lze používat jednou týdně jako doplněk k dezinfekčnímu roztoku.

ÚDRŽBA:

Varování:

- Neměňte roztoky na péči o kontaktní čočky, aniž byste konzultovali očního lékaře.
- **K čištění čoček nikdy nepoužívejte vodu, fyziologický roztok ani zvlhčující kapky.**
- K čištění čoček nepoužívejte sliny ani žádné běžné čisticí prostředky.
- Po dokončení dezinfekčního cyklu roztok vylijte a nepoužívejte jej znovu.
- Po uplynutí doby použitelnosti zlikvidujte veškerý roztok v lahvičce.
- Pouzdro na čočky pravidelně vyměňujte.

Čočky je třeba po každém vyjmutí vyčistit, opláchnout a dezinfikovat. Čištění a oplachování čoček je nezbytné k odstranění usazenin, které se hromadí na jejich povrchu. Dezinfekce je nezbytná ke zničení choroboplodných zárodků a bakterií.

- Při každém vyjmutí kontaktní čočky dezinfikujte.
- Roztoky na péči o kontaktní čočky vždy spotřebujte před vypršením data použitelnosti uvedeného na obalu.
- Roztoky a čočky uchovávejte mimo dosah zdrojů nadměrného tepla.
- Vždy se řiďte pokyny uvedenými v příbalových letáčích k roztokům na péči o kontaktní čočky.
- Pokud čočky nenosíte, uchovávejte je zcela ponořené ve vhodném roztoku. Před opětovným nasazením čoček je nutné 24 hodin před nošením provést kompletní cyklus čištění.
- Pouzdra na kontaktní čočky očistěte dezinfekčním roztokem.
- **K čištění pouzder nikdy nepoužívejte vodu.**

DOPORUČENÍ:

- Váš oční lékař vám předepsal kontaktní čočky na základě konkrétních vlastností vašich očí. Neměňte typ ani nastavení kontaktních čoček, aniž byste předem konzultovali svého očního lékaře.
- Pokud jsou vaše kontaktní čočky poškozené, nenoste je.
- Mějte u sebe dioptrické brýle (pro případ, že byste si museli vyndat kontaktní čočky).
- Zabraňte styku vašich kontaktních čoček s lakem na vlasy nebo jinými kosmetickými přípravky ve formě aerosolu.
- Nošení kontaktních čoček se nedoporučuje v prostředí s nízkou vlhkostí (letadla, fény na vlasy atd.).
- Těhotenství a některé léky mohou narušit tvorbu slz: poraďte se s očním lékařem.

KONTRAINDIKACE:

Kontaktní čočky NEPOUŽÍVEJTE v následujících případech:

- Akutní zánět nebo infekce přední oční komory.
- Onemocnění, poranění nebo abnormalita postihující rohovku, spojivku nebo oční víčka, s výjimkou případů, kdy je nutná oční protěza.
- Závažný nedostatek slz (syndrom suchého oka).
- Hypoestezie (snížená citlivost) rohovky, pokud se nejedná o afakii.
- Systémové onemocnění, které může postihnout oko nebo jehož průběh může být nošením kontaktních čoček zhoršen.
- Alergické reakce na povrchu nebo v okolních tkáních očí, které mohou být vyvolány nebo zhoršeny nošením kontaktních čoček nebo používáním roztoků.
- Alergie na některou ze složek roztoku na péči o kontaktní čočky.
- Bakteriální, plísňová nebo virová infekce rohovky.
- Zarudlé nebo podrážděné oči.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:

V případě výskytu některého z následujících problémů OKAMŽITĚ

VYJMĚTE ČOČKY:

- Bodání, pálení, svědění (podráždění) nebo jiná bolest očí
- Zhoršené pohodlí ve srovnání s počátečním nasazením čočky
- Pocit cizího tělesa v oku (cizí těleso, oděrka)
- Nadměrné slzení
- Zarudlé oči
- Neobvyklý výtok z očí
- Snížená ostrost vidění
- Rozmazané vidění, vnímání duhových nebo světlých kruhů kolem předmětů
- Citlivost na světlo (fotofobie)

Pokud problém po vyjmutí čočky zmizí, zkontrolujte objektiv:

Pokud je čočka poškozená, nevkládejte ji zpět do oka. Vložte ji do pouzdra a kontaktujte svého očního lékaře.

Pokud není čočka poškozená, před opětovným nasazením do oka ji očistěte, opláchněte a dezinfikujte.

Pokud problém přetrvává i po opětovném nasazení čočky, ihned ji vyjměte a obraťte se na svého očního lékaře, aby zjistil příčinu problému, který může souviset s poraněním oka (infekce, vřed rohovky, neovaskularizace atd.).

LIKVIDACE PROSTŘEDKU:

Čočky lze likvidovat spolu s domovním odpadem v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.

UPOZORNĚNÍ:

Jakoukoli závažnou událost související s vašimi čočkami je nutné nahlásit výrobci na adrese vigilance@precilens.com a příslušnému zdravotnímu úřadu ve vaší zemi.