

ISPĖJIMAI.

Kontaktiniai lęšiai yra daugkartinio naudojimo medicinos priemonė, skirta naudoti vienam pacientui.

Lęšius išduoda akių priežiūros specialistas, kuris privalo paaiškinti ir išmokyti naudotojus jais naudotis.

Su kontaktinių lęšių nešiojimu ir priežiūros priemonių naudojimu susijusios problemos gali sukelti rimtus akių pažeidimus. Todėl būtina laikytis sveikatos priežiūros specialisto nurodymų ir nurodymų, pateiktų informaciniuose lapeliuose, prideduose prie kontaktinių lęšių bei jų priežiūros priemonių.

Sveikatos priežiūros specialistas privalo paaiškinti naudotojui šiuo naudojimo nurodymus:

- Minkštieji lęšiai „Precilens“ skirti nešioti dieną, jų negalima nešioti miegant.
- Panaudojus ir prieš įsidedant pakartotinai kontaktinius lęšius būtina išimti, nuvalyti ir dezinfekuoti naudojant akių priežiūros specialisto rekomenduotas priemones.
- Būtina atvykti į visus akių priežiūros specialisto paskirtus vizitus, nes tai labai svarbu norint stebėti ir pritaikyti lęšius.
- Neleiskite kontaktiniams lęšiams liestis su vandeniu iš čiaupo.
- Niekada nenešiodami kontaktinių lęšių maudydamiesi vonioje ar duše, taip pat plaukiodami baseine ar jūroje.
- Nenešiodami kontaktinių lęšių, jei yra pavojingų ar dirginančių garų poveikio rizika.
- Jei skauda akis, jos gausiai ašaroja, parausta ar sumažėja regėjimo aštrumas, būtina nedelsiant išimti kontaktinius lęšius ir kreiptis į akių priežiūros specialistą.

INDIKACIJOS

Minkštieji kontaktiniai lęšiai yra dieną nešiojami lęšiai, keičiami kas ketvirtį arba kartą per metus, skirti trumparegystei, toliaregystei, astigmatizmui ir presbiopijai koreguoti, jei ragenos forma taisyklinga.

Kontaktiniai lęšiai tinka visų tipų pacientams, jei jie supranta, kad tokių lęšių nešiojimas yra panašus į akinių nešiojimą, nors prisitaikyti kartais gali būti sunku.

Nešioti kontaktinius lęšius gali bet kokio amžiaus asmenys, tačiau paprastai jie pritaikomi jauniems trumparegiams nuo 10 metų. Lęšius nešiojantiems vaikams būtina reguliariai tikrintis.

NAUDA IR KLINIKINĖS YPATYBĖS

Klinikinės ypatybės

Naudojant minkštuosius kontaktinius lęšius galima koreguoti visas įprastas refrakcijos ydas (trumparegystę, toliaregystę, astigmatizmą, senatvinę toliaregystę). Kadangi minkštieji lęšiai prisitaiko prie centrinio ragenos paviršiaus, ašarų plėvelė šioje vietoje yra plona ir vienodo storio, todėl lęšių optinė galia lygi nuliui. Dėl specialios „Amyopic“ lęšių konstrukcijos naudojant galios gradientą, periferinėje tinklainės dalyje sukuriama trumparegystės defokusavimas, kuris reguliuoja akies ašinio ilgio didėjimą ir lėtina trumparegystės progresavimą.

Klinikinė nauda

- Pagerėjęs regėjimo aštrumas ir regėjimo laukas
- Dažnų regos sutrikimų (trumparegystės, toliaregystės, astigmatizmo, senatvinės toliaregystės) optinis koregavimas
- Trumparegystės progresavimo stabdymas naudojant „Amyopic“ konstrukciją, skirtą vaikų ir jaunų trumparegių iki 20 metų trumparegystės progresavimui lėtinti.

REKOMENDUOJAMAS KEITIMAS

Kas ketvirtį arba kartą per metus, priklausomai nuo lęšių.

KASDIENĖ NEŠIOJIMO TRUKMĖ:

Kasdienę lęšių nešiojimo trukmę turi nustatyti akių priežiūros specialistas. Pradinio prisitaikymo laikotarpiu rekomenduojama šį laiką ilginti palaipsniui. Pasibaigus prisitaikymo laikotarpiui, lęšius galima nešioti 10–15 valandų per dieną.

Minkštųjų kontaktinių lęšių „Precilens“ sąrašą, kuriame pateikiama informacija apie jų savybes, galimas medžiagas, tikslinę naudotojų grupę ir rekomenduojamą keitimo grafiką, galite peržiūrėti nuskenavę šį QR kodą:



PAKUOTĖ

Lęšiai supakuoti į sterilų buteliuką, kuriame yra fiziologinio tirpalo. Buteliukas apsaugotas nuo nepastebimo atidarymo (iki pirmojo atidarymo). Jei pakuotė pažeista, lęšius naudoti negalima.

CE 045

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Atnaujinta 2024 m. liepos mėn.

PRECILENS - 25 rue Auguste Perret - 94000 CRETEIL - Prancūzija

Precilens

L'INNOVATION VISUELLE SUR MESURE

Minkštųjų lęšių „Precilens“ naudojimo instrukcija

ŠIAME PAKUOTĖS LAPELYJE PATEIKIAMA SVARBI INFORMACIJA, KURIĄ AKIŲ PRIEŽIŪROS SPECIALISTAI TURĖTŲ ŽINOTI IR PERDUOTI NAUDOTOJAMS. PERSKAITYKITE JŲ IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI.

Versijas kitomis kalbomis galima atsisiųsti iš svetainės www.precilens.com (žr. toliau pateiktą QR kodą)

Lęšių „Precilens“ platintojai privalo atspausdinti šį lapelį savo kalba ir pridėti jį prie siunčiamų lęšių.

Akių priežiūros specialistai taip pat privalo įteikti šį lapelį naudotojui.



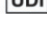

Versijas kitomis kalbomis galima atsisiųsti iš svetainės

www.precilens.com (žr. toliau pateiktą QR kodą) Lęšių „Precilens“ platintojai privalo atspausdinti šį lapelį savo kalba ir pridėti jį prie siunčiamų lęšių.

Akių priežiūros specialistai taip pat privalo įteikti šį lapelį naudotojui.



Ant etiketės pateiktų simbolių aprašymas:

	Medicinos priemonė
	Skirta vienam pacientui, daugkartinio naudojimo
	Lėšio pavadinimas
	Serijos numeris
	UDI (unikalus priemonės identifikavimo) kodas: unikalus identifikavimo kodas
	Modelio numeris
	Atitiktis Europos sveikatos ir saugos reikalavimams bei sertifikavimo įstaigos numeris
	Tinka naudoti iki (sterilumo galiojimo pabaigos data)
	Sterilizuota garais
	Unikali sterilumo barjero sistema
	Pagaminimo data
	Nenaudoti, jei pakuotė pažeista
	Žr. pakuotės lapelį

LĘŠIŲ ĮSIDĖJIMAS

Prieš naudojant pirmą kartą primygtinai rekomenduojama atlikti valymo ciklą. Įsidėti (taip pat ir išsiimti) lėšius reikia ant lygtaus, švaraus ir gerai apšviesto paviršiaus.

Prieš kiekvieną lėšių tvarkymą rankas būtina nuplauti, nuskalauti ir nusausinti švari, pūkelių nepaliekiančiu rankšluosčiu.

- Lėšiams iš dėklo išimti niekada nenaudokite pinceto ar kitų įrankių.
- Jei lėšius tenka tvarkyti virš plautuvės, įsitikinkite, kad vandens nutekėjimo anga yra užkimšta.
- Kad nesumaišytumėte dešiniojo ir kairiojo lėšių, patartina visada laikytis tos pačios tvarkos: pavyzdžiui, pirmiausia įsidėti dešinįjį lėšį, po to – kairįjį.
- Rekomenduojama lėšius įsidėti po rytinių procedūrų, prieš darantis makiažą, o išimti – prieš vakarines procedūras ir makiažo valymą.
- Uždėkite lėšį ant rodomojo piršto.
- Vienos rankos viduriniu pirštu pakelkite viršutinį voką, o kitos rankos viduriniu pirštu patraukite apatinį voką žemyn.
- Įsidėkite lėšį į akį (1 pav.). Pakartokite šią procedūrą su kita akimi.

LĘŠIŲ IŠĖMIMAS

- Pažiūrėkite į viršų ir viduriniu pirštu patraukite apatinį voką žemyn.
- Rodomojo piršto ir nykščio galiukais atsargiai išimkite lėšį iš akies (2 pav.).
- Tuos pačius veiksmus atlikite su kairiojuoju lėšiu.



REKOMENDUOJAMOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS

Kasdienei dezinfekcijai skirtas vandenilio peroksido pagrindu pagamintas tirpalas arba, jei jo nėra, daugiafunkcis minkštųjų lėšių tirpalas. Kartu su dezinfekciniu tirpalu kartą per savaitę galima naudoti fermentines baltymų nuosėdų šalinimo tabletes.

PRIEŽIŪRA

Įspėjimai

- Nekeiskite lėšių priežiūros tirpalų nepasitarę su akių priežiūros specialistu.
- **Lėšiams valyti niekada nenaudokite vandens, fiziologinio tirpalo ar drėkinamųjų lašų.**
- Lėšiams valyti nenaudokite seilių ar jokių buitinių valymo priemonių.
- Baigę dezinfekavimo ciklą tirpalą išpilkite ir jo pakartotinai nenaudokite.
- Pasibaigus galiojimo terminui, buteliuke likusį tirpalą pašalinkite.
- Reguliariai keiskite lėšių dėklą.

Lėšius būtina valyti, skalauti ir dezinfekuoti kiekvieną kartą juos išėmus. Lėšius būtina valyti ir skalauti, kad būtų pašalinti ant jų paviršiaus susikaupę nešvarumai. Dezinfekcija būtina mikrobams ir bakterijoms sunaikinti.

- Dezinfekuokite lėšius kiekvieną kartą juos išsiėmę.
- Lėšių priežiūros tirpalus naudokite ne vėliau kaip iki buteliuke nurodyto galiojimo pabaigos datos.
- Laikykite tirpalus ir lėšius atokiau nuo per didelio karščio šaltinių.
- Visada laikykitės nurodymų, pateiktų lėšių priežiūros tirpalų pakuočių lapeliuose.
- Kai lėšių nenešiojate, laikykite juos visiškai panardintus į tinkamą tirpalą. Prieš vėl įsidėdant lėšius, 24 val. iki įsidėjimo būtina atlikti visą valymo ciklą.
- Kontaktinių lėšių dėklus valykite dezinfekavimo tirpalu.
- **Dėklams valyti niekada nenaudokite vandens.**

REKOMENDACIJOS

- Akių priežiūros specialistas paskyrė jums kontaktinius lėšius atsižvelgdamas į individualias jūsų akių ypatybes. Nekeiskite kontaktinių lėšių tipo ar parametrų nepasitarę su specialistu.
- Nenešiokite kontaktinių lėšių, jei jie pažeisti.
- Visada turėkite su savimi akinius (jei kontaktinius lėšius prirėmė išimti).
- Saugokite kontaktinius lėšius nuo sąlyčio su plauku laku ar kitais aerosoliniais kosmetikos produktais.
- Nerekomenduojama nešioti kontaktinių lėšių aplinkoje, kurioje yra mažas drėgnumas (lėktuvuose, naudojant plaukų džiovintuvą ir pan.).
- Nėštumas ir tam tikri vartojami vaistai gali sutrikdyti ašarų išsiskyrimą: pasitarkite su savo akių priežiūros specialistu.

KONTRAINDIKACIJOS

NENAUDOKITE kontaktinių lėšių šiais atvejais:

- Ūminis priekinės akies kameros uždegimas arba infekcija.
- Līga, trauma ar pakitimas, pažeidžiantis rageną, junginę arba vokus, išskyrus atvejus, kai reikalingas protezinis lėšis.
- Sunkus ašarų trūkumas (sausos akys).
- Ragenos hipostezija (sumažėjęs ragenos jautrumas), jei akys nėra afakinės.
- Sisteminė līga, galinti paveikti akis arba paumėti nešiojant kontaktinius lėšius.
- Alerginės akies paviršiaus ar greta esančių audinių reakcijos, kurias gali sukelti arba sustiprinti kontaktinių lėšių nešiojimas ar susijusių tirpalų naudojimas.
- Alergija bet kuriai lėšių priežiūros tirpalo sudedamajai daliai.
- Bakterinė, grybelinė arba virusinė ragenos infekcija.
- Paraudusios arba sudirgusios akys.

ŠALUTINIS POVEIKIS

NEDELSDAMI IŠSIIMKITE LĘŠIUS, jei pasireiškia bent viena iš šių problemų:

- dilgsėjimas, deginimas, niežėjimas (dirginimas) ar kitoks akių skausmas;
- sumažėjęs komfortas, palyginti su pradiniu lėšių įsidėjimu;
- nenormalus svetimkūnio pojūtis akyje (svetimkūnis, nubrozdinimas);
- gausus ašarojimas;
- paraudusios akys;
- neįprastos išskyros iš akių;
- sumažėjęs regėjimo aštrumas;
- neryškus matymas, vaivorykštės ar ratilai aplink objektus;
- jautrumas šviesai (fotofobija).

Jei išsiėmus lėšį problema išnyksta, patikrinkite lėšį.

Jei lėšis pažeistas, nebedėkite jo atgal į akį. Įdėkite lėšį į dėklą ir susisiekite su savo akių priežiūros specialistu.

Jei lėšis nepažeistas, prieš vėl įsidėdami jį į akį, išvalykite, nuskalaukite ir dezinfekuokite.

Jei vėl įsidėjus lėšį problema išlieka, nedelsdami jį išsiimkite ir kreipkitės į akių priežiūros specialistą, kad būtų nustatyta problemos priežastis, kuri gali būti susijusi su akies pažeidimu (infekcija, ragenos opa, neovaskularizacija ir pan.).

MEDICINOS PRIEMONĖS ŠALINIMAS

Lėšius galima šalinti kartu su buitinėmis atliekomis, laikantis vietinių atliekų tvarkymo taisyklių.

ATSARGIAI!

Apie bet kokį su lėšiais susijusį sunkų nepageidaujamą reiškinį būtina pranešti gamintojui (el. paštu vigilance@precilens.com) ir atitinkamai sveikatos priežiūros institucijai jūsų šalyje.