

UPOZORNENIA:

Kontaktné šošovky sú zdravotnícke pomôcky na opakované použitie pre jedného používateľa. Vydáva ich očný lekár alebo optometrista, ktorý musí používateľov informovať a zaškoliť v ich používaní.

Problémy spojené s nosením kontaktných šošoviek a výrobkami na starostlivosť o ne môžu spôsobiť vážne poškodenie očí. Preto je nevyhnutné dodržiavať pokyny lekára a pokyny na príbalových letákoch kontaktných šošoviek a prípravkov na starostlivosť o šošovky.

Zdravotnícky pracovník by mal používateľa informovať o nasledujúcich pokynoch na nosenie šošoviek:

- Mäkké kontaktné šošovky Precilens sú určené na denné nosenie a nemali by sa nosiť počas spánku.
- Po použití a pred opätovným použitím je potrebné šošovky vybrať, vyčistiť a dekontaminovať pomocou lekárom odporúčaných prípravkov na starostlivosť o šošovky.
- Je potrebné dodržiavať termíny návštev, ktoré lekár naplánoval, nevyhnutných na kontrolu a sledovanie adaptácie.
- Nikdy šošovky nevystavujte kontaktu s vodou z vodovodu.
- Nikdy nenoste kontaktné šošovky počas kúpania, sprchovania, plávania v bazéne alebo mori.
- Nenoste šošovky, ak existuje riziko vystavenia nebezpečným alebo dráždivým výparom.
- V prípade bolesti očí, nadmerného slzenia, zníženej ostrosti alebo začervenania očí je nevyhnutné šošovky vybrať a urýchlene kontaktovať lekára.

INDIKÁCIE:

Mäkké kontaktné šošovky sú denné kontaktné šošovky, ktoré sa vymieňajú každé tri mesiace alebo raz ročne, a sú určené na korekciu krátkozrakosti, ďalekozrakosti, astigmatizmu či presbyopie v prípade normálnych rohoviek.

U detí a mladých krátkozrakých ľudí do 20 rokov môžu šošovky AMYOPIC spomaliť vývoj krátkozrakosti.

KLINICKÉ PRÍNOSY A VÝKONNOSŤ:

Klinická výkonnosť:

Mäkké kontaktné šošovky korigujú všetky bežné zrakové vady (krátkozrakovosť, ďalekozrakovosť, astigmatizmus, presbyopiu). Keďže mäkké šošovky prilipnú na centrálnu oblasť rohovky, slzný film je tam tenký a rovnomerne hrubý, a preto má nulovú silu.

Klinické prínosy:

- Zlepšenie ostrosti zraku a zorného poľa
- Optická kompenzácia bežných zrakových vád (krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus, presbyopia)

ODPORÚČANÁ VÝMENA:

Štvrťročne alebo ročne v závislosti od šošoviek.

DĹŽKA ČASU DENNÉHO NOSENIA:

Trvanie denného nosenia musí určiť lekár/optometrista.

Pri prvej kontrole a adaptácii sa odporúča toto trvanie postupne predlžovať.

Po uplynutí adaptačného obdobia sa denná doba nosenia šošoviek môže pohybovať od 10 do 15 hodín denne.

Zoznam mäkkých šošoviek Precilens s uvedením práv, možných použitých materiálov, dotknutej populácie a odporúčanej výmene získate naskenovaním QR kódu naproti.



BALENIE:

Šošovky sú balené v sterilnom flakóne s obsahom fyziologického roztoku. Flakón je vybavený systémom zabezpečenia proti nesprávnej manipulácii až do prvého otvorenia. Ak je obal poškodený, šošovka sa nesmie používať.

€ 0459

Uchovávajte mimo dosahu detí.



Francúzsko - Aktualizácia: december 2022

PRECILENS - 25 rue Auguste Perret - 94000 CRETEIL

 **Precilens**
TAILOR-MADE VISUAL INNOVATION

NÁVOD NA POUŽITIE MÄKKÝCH KONTAKTNÝCH ŠOŠOVIEK PRECILENS

TENTO LETÁK OBSAHUJE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, KTORÉ MUSÍ OČNÝ LEKÁR ALEBO OPTOMETRISTA POZNAŤ A ODVOZDAŤ ICH POUŽÍVATEĽOM KONTAKTNÝCH ŠOŠOVIEK. PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE HO PRE BUDÚCE POUŽITIE.

Leták v ďalších jazykoch si môžete stiahnuť z webovej stránky www.precilens.com

Distribútori šošoviek Precilens sú povinní vytlačiť tento leták vo svojom jazyku a systematicky ho priložiť ku každej dodávanej šošovke.

Oční lekári a optometristi sú povinní poskytnúť ho používateľovi.




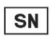







Other languages can be downloaded from www.precilens.com

Distributors of Precilens lenses are required to print this leaflet in their own language and enclose it with the lenses they ship.

Eye care professionals are also required to give the leaflet to the wearer.



Vysvetlivky symbolov na etikete:

	Zdravotnícka pomôčka
	Jeden pacient, viacero použití
	Názov šošovky
	Sériové číslo
	Kód UDI (JIK): jedinečný identifikačný kód
	Číslo modelu
	Európska dohoda o posudzovaní zhody v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia a číslo certifikačného úradu
	Spotrebujte do (dátum expirácie sterilného stavu)
	Sterilizácia pomocou pary
	Nepoužívajte, ak je obal poškodený
	Konzultácia príbalového letáku

NASADENIE ŠOŠOVIEK:

Pred prvým použitím sa dôrazne odporúča vykonať cyklus čistenia.


Nasadenie (ako aj vybratie) by sa malo vykonávať nad rovným, čistým a dobre osvetleným povrchom.

Pred každou manipuláciou by ste si mali ruky umyť, opláchnuť a utrieť čistou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

- Na vyberanie šošoviek z puzdra nikdy nepoužívajte pinzetu ani iné pomôcky.
- Ak musíte so šošovkami manipulovať nad umývadlom, uistite sa, že je odtok uzavretý.
- Aby nedošlo k zámene pravej a ľavej šošovky sa odporúča postupovať vždy v rovnakom poradí, napríklad najprv pravá šošovka a potom ľavá šošovka.
- Odporúča sa, aby ste si kontaktné šošovky nasadili po rannej hygiene a pred nanesením make-upu a aby ste ich vybrali pred večernou hygienou a odličením.
- Umiestnite šošovku na ukazovák.
- Na otvorenie očných viečok použite prostriedok jednej a druhej ruky
- Nasadte si šošovku na oko (obrázok č. 1). Postup zopakujte aj pri druhom oku.

VYBRATIE ŠOŠOVIEK:

- Pozrite sa nahor a prostredníkom potiahnite smerom dole spodné viečko.
- Opatrne odstráňte šošovku z oka pomocou špičky ukazováka a palca (obrázok č. 2).
- Rovnako postupujte pri ľavej šošovke.

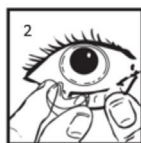

ODPORÚČANÉ PROSTRIEDKY NA ČISTENIE:

Roztok na báze peroxidu vodíka na dennú dekontamináciu alebo multifunkčný roztok na mäkké šošovky.

Enzymatické deproteinizačné tablety možno kombinovať s dekontaminačným roztokom raz týždenne.

STAROSTLIVOSŤ:

Upozornenia:

- Čistiace roztoky nemeňte bez konzultácie svojho očnému lekárovi.
- Na čistenie šošoviek nikdy nepoužívajte vodu, fyziologický roztok ani očné kvapky na zvýšenie komfortu.
- Na čistenie šošoviek nepoužívajte sliny ani žiadne prostriedky do domácnosti.
- Po ukončení dekontaminačného cyklu roztok zlikvidujte a opätovne ho nepoužívajte.

- Po uplynutí dátumu spotreby zlikvidujte roztok, ktorý zostal vo fľaši.
- Puzdro pravidelne vymieňajte.

Šošovky je potrebné po každom vybratí vyčistiť, opláchnuť a vydezinfikovať. Na odstránenie usadenín z povrchu šošoviek je potrebné ich vyčistenie a opláchnutie. Na zničenie mikróbov a baktérií je potrebná dezinfekcia.

- Šošovky pri každom vybratí dekontaminujte.
- Čistiace roztoky spotrebujte do dátumu expirácie uvedenom na fľaši s roztokom.
- Roztoky a šošovky uchovávajte mimo dosahu zdrojov nadmerného tepla.
- Vždy dodržiavajte pokyny uvedené v príbalových letádoch roztokov na šošovky.
- Keď šošovky nenosíte, uchovávajte ich úplne ponorené v príslušnom roztoku. Pred ich opätovným nasadením je 24 hodín pred nosením potrebné vykonať kompletný cyklus čistenia.
- Puzdrá na kontaktné šošovky čistite dekontaminačným roztokom.
- **Na čistenie puzdier nikdy nepoužívajte vodu.**

ODPORÚČANIA:

- Nenasadzujte si poškodené šošovky.
- Noste so sebou okuliare vhodné pre váš zrak (pre prípad, že by ste si museli vybrať kontaktné šošovky)
- Zabráňte tomu, aby prišli kontaktné šošovky do kontaktu s lakom na vlasy alebo inými kozmetickými sprejmi
- Neodporúčame nosiť šošovky v prostredí s nízkou vlhkosťou (lietadlá, helmy u kaderníka atď.)
- Tehotenstvo a niektoré lieky môžu narušiť slznú sekréciu: poraďte sa so svojím

KONTRAINDIKÁCIE:

NEPOUÍVAJTE kontaktné šošovky v nasledujúcich prípadoch:

- Akútny zápal alebo infekcia prednej očnej komory.
- Choroba, poranenie alebo abnormalita, ktorá postihuje rohovku, spojovku alebo očné viečka, okrem prípadov, keď je potrebná protetiká šošovka.
- Závažný nedostatok slzného sekrétu (suché oči).
- Hypesztézia rohovky (znížená citlivosť rohovky), ak oči nie sú afakické.
- Systémové ochorenie, ktoré môže postihnúť oko alebo sa môže zhoršiť nosením kontaktných šošoviek.
- Alergické reakcie príslušných povrchov alebo tkanív oka, ktoré môže vyvolať alebo zhoršiť nosenie kontaktných šošoviek alebo používanie potrebných roztokov.
- Alergia na zložku čistiaceho roztoku.
- Bakteriálna, plesňová alebo vírusová infekcia rohovky.
- Začervenané alebo podráždené oči.

NEŽIADUCÉ ÚČINKY:

Ak sa vyskytne niektorý z nasledujúcich problémov, OKAMŽITE ŠOŠOVKY VYBERTE:

- Pichanie, pálenie a svrbenie (podráždenie) alebo iné bolesti očí.
- Strata pocitu pohodlia v porovnaní s počiatočným nasadením šošovky.
- Abnormálny pocit cudzieho telesa v oku (cudzí teleso, poškrabaná oblasť).
- Nadmerné slzenie
- Začervenané oči
- Nezvyčajné očné výtoky
- Znížená ostrosť zraku
- Rozmazané videnie, videnie dúhy alebo prstencov okolo predmetov
- Citlivosť na svetlo (fotofóbia)

Ak problém prestane po vybratí šošovky, skontrolujte šošovku:

Ak je šošovka poškodená, nesmie sa vložiť späť do oka. Umiestnite ju do puzdra a kontaktujte očnému lekárovi.

Ak šošovka nie je poškodená, pred nasadením späť na oko je potrebné ju vyčistiť, opláchnuť a vydezinfikovať.

Ak problém pretrváva aj po nasadení šošovky, okamžite ju vyberte a poraďte sa so svojím očným lekárom, aby zistil príčiny tohto problému, ktoré môžu súvisieť s očnou léziou (infekcia, vred rohovky, neovaskularizácia...).

LIKVIDÁCIA ŠOŠOVIEK:

Šošovky možno zahodiť do domáceho odpadu v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.

OBOZRETNOSŤ:

Každý závažný incident týkajúci sa vašich šošoviek je potrebné nahlásiť výrobcovi na adrese vigilance@precilens.com a príslušnému zdravotníckemu úradu vašej krajiny.