

NOR Brukerveiledning Brukerveiledning for harde linser

Denne veiledningen inneholder viktige opplysninger, les gjennom den og oppbevar den til senere bruk. Linsene er et medisinsk utstyr som alltid skal tilpasses av en kontaktlinsespesialist. For korrekt användelse er det viktig at du følger alle instruksjonene fra spesialisten og rådene om bruk som angis på linseemballasjen og linsemidlene.

INDIKASJONER:

De harde linsene er hornhinneinserter til bruk om dagen for behandling av nærsynthet, langsynthet, astigmatisme og presbyopi på jevne eller ujevne hornhinner.

Nos barn og unge på under 20 år, kan kontaktlinsene PRE AMYOPIC bremse utviklingen av nærsynthet.

ANBEFALT FORNYING:




Hver 18. måned

Hver 12 måned for kontaktlinser beregnet for barn og unge.

EMBALLASJE:

Linsene er pakket i en beholder som inneholder en dekontamineringsløsning. Den har et system som gjør at linsene beskyttes helt til første åpning. Hvis emballasjen er skadet, skal linsen ikke tas i bruk.

Følgende opplysninger er angitt på etiketten:

	Linsens handelsnavn
	Navnet på linsematerialet
	Produsentens navn og adresse
	
SN	Serienummer
CE 0459	Produktet tilfredsstillr relevante EU-krav til helse og sikkerhet og sertifiseringsorganets nummer
	Holdbarhetsdato
	Navnet på løsningsens konserveringsmiddel og utløpsdato
	Les veiledningen.
	Skal ikke åpnes hvis emballasjen er skadet.

FORHOLDSREGLER FOR BRUK

Spesialisten vil gi deg nøyaktige opplysninger om hvordan du vedlikeholder linsene, hvordan du setter de på og fjerner de. Vask og tørk alltid hendene nøye før du setter inn eller fjerner linsene.

Sett ikke inn linsene hvis de er skadet.

Etter bruk og før du bruker de igjen, skal linsene fjernes, rengjøres og dekontamineres med vedlikeholdsproduktene som spesialisten har anbefalt.

Disse linsene er beregnet til bruk om dagen: Sett inn linsene om morgenen og fjern dem om kvelden.

For at kontaktlinsene PRE AMYOPIC skal være effektive, anbefales det at de brukes minst ti timer om dagen eller lenger avhengig av fysisk toleranse.

Fjern alltid linsene før du går og legger deg.

Hvis du ikke bruker linsene i flere dager, se linsevæskens veiledning før du bruker linsene igjen.

Ta alltid med deg brillene dine i tilfelle du blir nødt til å fjerne linsene.

For å unngå at linsematerialet eller linsenes geometri forringes, er det ytterst viktig å fornye dem hver 18. måned eller hver 12 måned for kontaktlinser beregnet for barn og unge.

Det er viktig at du møter opp på de planlagte avtalene hos spesialisten som er absolutt nødvendige for å kontrollere og oppfølge tilpassingen.

SETTE INN LINSENE

Håndteringen av kontaktlinser består av en rekke enkle trinn som du bør utføre samtidig som du overholder visse grunnleggende hygieneregler.

- Hver gang du skal håndtere linsene, må du vaske, skylle og tørke hendene med en ren og løfri håndduk.

- Sett inn og ta ut linsene over en flat, ren overflate med godt lys.

- Hvis du må håndtere linsene over en vask, må du stenge utløpsproppen.

- For å unngå å forveksle høyre og venstre linse anbefaler vi deg å alltid begynne med den samme linsen: for eksempel først den høyre og så den venstre linsen.

- Det anbefales å sette inn linsene etter at du har stelt og sminket deg om morgenen og å fjerne dem før du steller deg og fjerner sminken om kvelden.

- **Sett linsen på pekefingeren.**

- Bruk begge langfingerne for å åpne øyelokkene.

- Sett linsen på øyet (figur 1). Gjenta prosessen for det andre øyet.

F.JERNE LINSENE

Første framgangsmåte

- Bøy hodet over et spill som ligger flatt på et bord.

- Åpne øyet helt opp og se fast på speilet samtidig som du dreier hodet mot den siden det gjelder.

- Med høyre pekefinger mot tinningen ved høyre øyelokks tinningside, drar du i øyelokkets akse samtidig som du holder øyet helt åpent (figur 2).

- Linsen løsner og faller på speilet.

- Gjør det samme for venstre linse.

Andre framgangsmåte

- Med øynene helt åpne, setter du pekefingeren på den ene hånden på det øvre øyelokket ved kanten av øyevippene, og pekefingeren på den andre hånden på det nedre øyelokket ved kanten av øyevippene, klem pekefingrene lett sammen mot midten samtidig som du klemmer lett på øyelokkenes kant for å løsne linsen fra øyet (figur 3)

VEDLIKEHOLD

Det er ytterst viktig å vedlikeholde linsene. Du må alltid følge instruksjonene for vedlikeholdsløsningen nøye. Dekontaminer linsene hver gang du fjerner de fra øyet for å eliminere bakterier og for å være sikker på at det er behagelig å bruke linsene uten risiko.

Endre ikke vedlikeholdssystemet som spesialisten har anbefalt deg å bruke.

Rengjør etuiet regelmessig i samsvar med anvisningene på vedlikeholdsproduktet.

KONTRAINDIKASJONER

Bruk ikke legemidler for øyne (øyedråper eller andre øyeprodukter) uten å ha rådført deg med spesialisten.

Rengjør ikke linsene eller etuiet med vann fra kranen.

Bruk verken spytt eller husholdningsmidler til å vedlikeholde linsene: Bruk kun de produktene som spesialisten har anbefalt deg.

Endre ikke merke på pleieprodukt uten å rådføre deg med spesialisten først.

La ikke linsene komme i kontakt med hårspray eller andre kosmetiske sprayprodukter.

Husk å fjerne linsene før du legger deg (se avsnittet om forholdsregler ved bruk).

Bruk ikke linsene hvis du tar et bad eller en dusj eller hvis du skal i bassenget eller bade i havet.

Bruk ikke linsene hvis du eksponeres for farlig eller irriterende røyk.

Graviditet og visse legemidler kan forstyrre tåreskresjonen: Ta dette opp med spesialisten.

Det frarådes å bruke linsene ved øyesykdom og i omgivelsler med lav fuktighet (fly, under hårtørker hos frisøren, osv.).

Hvis du merker følgende symptomer: irittet eller rødt øye, følelse av ubehag, tåreflod, nedsatt synsstyrke, dårlig syn, osv., fjerner du linsen og renser den. Hvis du fremdeles kjenner ubehag, ta kontakt med spesialisten.

BIVIRKNINGER

Bivirkninger som kan inntreffe ved bruk av alle typer linser, og som krever at du slutter å bruke linsene, og tar kontakt med en spesialist:

- Irritert øye, følelse av ubehag, tåreflod
- Vaskularisasjon, abrasjon, sår, byll
- Lysfølskhet

I

Consigli per l'uso Guida all'uso delle vostre lenti rigide

Questo opuscolo contiene informazioni importanti; leggetele e conservatele per utilizzi futuri.

Le lenti sono dispositivi medici e devono sempre essere adattate da uno specialista in lenti a contatto. Per un uso corretto, è importante che seguite tutte le istruzioni fornite dallo specialista e i consigli per l'uso riportati sulla confezione delle lenti e dei prodotti di manutenzione.

INDICAZIONI:

Le lenti rigide sono lenti corneali da indossare di giorno per il trattamento della miopia, dell'ipermetropia, dell'astigmatismo e della presbiopia su cornee regolari e irregolari.

Nei bambini e negli adolescenti fino a 20 anni le lenti PRE AMYOPIC possono frenare l'evoluzione della miopia.

SOSTITUZIONE CONSIGLIATA:


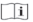

Ogni 18 mesi

Per 12 mesi per le lenti per bambini e adolescenti.

CONFEZIONAMENTO:

Le lenti sono confezionate in una busta contenente una soluzione decontaminante e dotata di un sistema di protezione fino alla prima apertura. Se il confezionamento è danneggiato, non utilizzare le lenti.

Sull'etichetta sono riportate le informazioni seguenti:

	Nome commerciale della lente
	Nome del suo materiale
	Nome e indirizzo del produttore
	
SN	Numero di serie
CE 0459	Conformità europea alle esigenze di salute e sicurezza e Numero dell'organismo di certificazione
	Data limite di utilizzo
	Nome del conservante della soluzione e sua data di scadenza
	Consultare le istruzioni
	Non aprire se il confezionamento è danneggiato

PRECAUZIONI PER L'USO

Il vostro specialista vi darà tutte le istruzioni precise sulla manutenzione delle lenti, il loro inserimento e la loro rimozione. Lavatevi e asciugatevi sempre le mani con cura prima di mettere o togliere le lenti.

Non metteste le lenti se sono danneggiate.

Dopo l'uso e prima di riutilizzarle, le lenti devono essere tolte, pulite e decontaminate con i prodotti di manutenzione che lo specialista vi ha consigliato.

Queste lenti sono destinate a essere portate di giorno: mettetele al mattino e toglietele alla sera.

Il periodo minimo consigliato di utilizzo per una buona efficacia delle lenti PRE AMYOPIC è di almeno 10 ore al giorno, a seconda della tolleranza fisiologica.

Togliete sempre le lenti prima di coricarvi.

Se non portate le lenti per diversi giorni, consultate le istruzioni della soluzione di manutenzione prima di riutilizzarle.

Portate sempre con voi occhiali adatti alla vostra vista (nel caso in cui foste obbligati a togliere le lenti).

Per evitare un'alterazione del materiale o della geometria delle lenti, è fondamentale sostituire ogni 18 mesi oppure per 12 mesi nel caso di lenti per bambini e adolescenti. Rispettate gli appuntamenti programmati dal vostro medico, che sono indispensabili per il controllo e il monitoraggio del vostro adattamento.

METTERE LE LENTI

La manipolazione delle lenti a contatto è una successione di gesti semplici che conviene effettuare rispettando determinate regole igieniche elementari.

- Prima di ogni manipolazione, lavate, sciacquate, poi asciugate le mani con un panno pulito e privo di pelucchi.

- L'inserimento e la rimozione devono essere effettuati al di sopra di una superficie plana, pulita e illuminata.

- Se dovette manipolare le lenti sopra un lavandino, assicuratevi che il foro di scarico sia tappato.

- Al fine di evitare qualsiasi confusione tra la lente destra e la sinistra, si consiglia di procedere sempre nello stesso ordine: ad esempio, prima la lente destra e poi la lente sinistra.

- Si raccomanda di mettere le lenti dopo la toilette del mattino e prima di truccarsi e di toglierle prima della toilette della sera e di struccarsi.

- **Mettete la lente sull'indice**

- Utilizzate il medio di una mano e quello dell'altra mano per aprire le palpebre.

- Mettete la lente sull'occhio (Figura 1). Ripetete la procedura per l'altro occhio.

TOGLIERE LE LENTI

Primo metodo

- Inclinate la testa al di sopra di uno specchio posto in piano sul tavolo.

- Spalancate gli occhi e guardate fisso nello specchio ruotando leggermente la testa del lato dell'occhio interessato.

- Con l'indice destro posto all'angolo temporale della palpebra destra, tirate nell'asse di quest'ultimo cercando di mantenere gli occhi spalancati (Figura 2).

- La lente si stacca e cade sullo specchio.

- Per la lente sinistra procedete allo stesso modo.

Secondo metodo

- Con gli occhi spalancati, metteste l'indice di una mano sulla palpebra superiore a livello del bordo delle ciglia, l'indice dell'altra mano sulla palpebra inferiore a livello del bordo delle ciglia e avvicinate i due indici verso il centro esercitando una leggera pressione sul bordo delle palpebre per staccare la lente dall'occhio (Figura 3).

MANUTENZIONE

È fondamentale effettuare una corretta manutenzione delle lenti. Seguite sempre con precisione le istruzioni dei prodotti di manutenzione. Decontaminate le lenti ogni volta che le togliete per eliminare i batteri e per assicurarvi di indossarle comodamente e senza rischi.

Non cambiate il prodotto di manutenzione che vi ha consigliato lo specialista.

Pulite regolarmente l'astuccio seguendo le indicazioni dei prodotti utilizzati per la manutenzione delle lenti.

CONTRAINDICAZIONI

Non prendete medicinali per gli occhi (colliri o qualsiasi altro prodotto oftalmico) senza consultare lo specialista.

Non pulite le lenti o l'astuccio con l'acqua del rubinetto.

Non utilizzate la saliva né alcun prodotto domestico per la manutenzione delle lenti: utilizzate solo i prodotti raccomandati dal vostro specialista.

Non cambiate la marca del prodotto di manutenzione senza consultare lo specialista.

Non metteste le lenti a contatto con acqua o qualsiasi altro prodotto cosmetico sotto forma di aerosol.

Non tenete le lenti per dormire (vedere § Precauzioni per l'uso).

Non indossate le lenti se fate il bagno o la doccia o se andate a nuotare in piscina o al mare.

Non indossate le lenti se siete esposti a fumi pericolosi o irritanti.

La gravidanza e alcuni medicinali possono perturbare la secrezione lacrimale: parlatene allo specialista.

L'uso delle lenti è sconsigliato in caso di patologia oculare e in atmosfere a scarsa igrometria (aereo, casco del parrucchiere...). Se constatate i seguenti sintomi: irritazione o arrossamento dell'occhio, sensazione di fastidio, lacrimazione, diminuzione dell'acuità visiva o ci vedete male... togliete la lente e pulitela. Se il fastidio persiste, consultate lo specialista.

EFFETTI SECONDARI

Gli effetti secondari possibili per qualsiasi lente e che richiedono l'interruzione del loro uso e della consultazione di uno specialista sono:

• Irritazione dell'occhio, sensazione di fastidio, lacrimazione

• Vascolarizzazione, abrasione, ulcerazione, ascesso

• Fotofobia

E

Instrucciones de uso Guía para utilizar las lentillas rígidas

Este folleto contiene información importante; léalo y guárdelo para consultarlo en el futuro.

Las lentillas son dispositivos Sanitarios y siempre deben ser adaptadas por un especialista en lentillas de contacto. Para asegurar el uso correcto, es importante que siga todas las instrucciones de su especialista y las instrucciones de uso mencionadas en el envase de sus lentillas y productos de limpieza.

INDICACIONES:

Las lentillas rígidas son lentillas de contacto diurnas para tratar la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia en córneas regulares o irregulares.

En niños y jóvenes menores de 20 años, las lentillas PRE AMYOPIC también pueden retrasar el desarrollo de la miopía.

RENOVACIÓN RECOMENDADA:




Cada 18 meses

Cada 12 meses para lentillas para niños y jóvenes.

ENVASE:

Las lentillas están envasadas en un estuche que contiene una solución descontaminante. Está sellado con un sistema inviolable hasta la primera apertura. Si el envase está dañado, no utilice las lentillas.

En la etiqueta consta la siguiente información:

	El nombre comercial de la lentilla
	El nombre del material
	El nombre y la dirección del fabricante
	
SN	El número de serie
CE 0459	Cumplimiento de las normas europeas de higiene y seguridad y número del organismo certificador
	Fecha de vencimiento
	Nombre del conservante de la solución y su fecha de vencimiento
	Consulta del aviso
	No abrir si el envase está dañado

PRECAUCIONES

Su especialista le dará instrucciones específicas sobre cómo cuidar sus lentillas, cómo colocárselas y cómo desecharlas. Siempre lávese y séquese bien las manos antes de ponerse o sacarse las lentillas.

No use las lentillas cuando estén dañadas.

Después del uso y antes de volver a usarlas, las lentillas deben quitarse, limpiarse y descontaminarse con los productos de limpieza recomendados por su especialista.

Estas lentillas están diseñadas para uso diurno: colóquelas a la mañana y séquelas a la noche.

El tiempo mínimo de uso recomendado para que las lentillas PRE AMYOPIC sean efectivas es de 10 horas al día o más, dependiendo de la tolerancia fisiológica.

Séquese las lentillas siempre antes de acostarse.

Si no usa las lentillas durante varios días, consulte las instrucciones de la solución de mantenimiento antes de volver a ponérselas.

Use siempre gafas diseñadas para sus características visuales (en caso de que deba sacarse las lentillas).

Para evitar la alteración del material o de la geometría de las lentillas, es fundamental renovarlas cada 18 meses o cada 12 meses en el caso de los lentes para niños y jóvenes. Respete las citas previstas por su médico, que son fundamentales para controlar y supervisar su adaptación.

DAN

Brugsvejledning Brugsvejledning til hårde linser

Denne folder indeholder vigtige informationer. Læs den, og opbevar den til senere brug.

Linserne er et medicinsk produkt og skal altid tilpasses af en kontaktlinsepecialist. For at kunne bruge dem korrekt, er det vigtigt, at du følger alle instruktioner fra din optiker og de anbefalinger, der er nævnt på emballagen til linsene og renseprodukterne.

ANVENDELSE:

De hårde linser er corneale linser til brug om dagen til behandling af nærsynethed, langsmethed, astigmatisme og gammelsynhd på regulære eller irregulære hornhinder.

Hos børn og unge under 20 år kan AMYOPIC linserne bidrage til at bremse udviklingen af nærsynethed.

ANBEFALET FORNYELSE:




Hver 18. måned

En gang årligt for linser til børn og unge.

PAKNING:

Linserne er pakket i en forsejlelseemballage indeholdende en dekontamineringsvæske. Den er forsejlet frem til første gang den åbnes. Hvis pakningen er beskadiget, må linserne ikke bruges.

På etiketten er følgende informationer anført:

	Linsens handelsnavn
	Materialets betegnelse
	Producentens navn og adresse
	
SN	Serienummer
CE 0459	EU-overensstemmelse med sundheds- og sikkerhedskrav og nummeret på det certifice- rende organ
	Senest anvendelsesdato
	Navnet på væskens konserveringsmiddel og detsets udløbsdato
	Læs vejledningen
	Må ikke åbnes, hvis emballagen er beskadiget

FORHOLDSREGLER FOR BRUG

Din optiker giver nøjagtige instruktioner om rengøring af linserne, hvordan de sættes i og tages ud.

Vask og tør altid hænderne omhyggeligt, før du sætter linserne i eller tager dem ud.

Sæt ikke linserne i, hvis de er beskadigede.

Når du har taget linserne ud, og får de skal bruges igen, rengøres og steriliseres med de renseprodukter, din optiker har anbefalet.

Disse linser er beregnet til brug om dagen: sæt dem i om morgenen og tag dem ud om aftenen.

For at opnå den maksimale effekt af AMYOPIC linserne anbefales det at bære dem i mindst 10 timer om dagen afhængigt af ens fysiologiske tolerance.

Tag altid linserne ud, før du går i seng.

Hvis du ikke bruger dine linser i nogle dage, henvises til brugsvejledningen for rensævsken, før de bruges igen.

Sørg altid for at have briller med, der passer til dit syn (hvis det skulle blive nødvendigt, at tage linserne ud).

For at undgå, at der sker materialeforandringer eller forandringer i linsernes form, er det af yderste vigtighed at forny dem hver 18. måned 1ler en gang årligt for linser til børn og unge.

Overhold planlagte aftaler med din optiker eller øjenlæge, da det er væsentligt for kontrol og opfølgning af tilpas-ningen.

SÅDAN ISÆTTES LINSERNE

Kontaktlinser håndteres med en serie af enkle bevægelser, som bør udføres under behørigt hensyn til visse elementære hygiejneregler.

- Før enhver håndtering skal hænderne vaskes, skylles og dernæst tørres med et rent, fugtfrt håndklæde.

- Isætning og udtagning skal foretages over en plan flade, der er ren og godt oplyst.

- Hvis du ønsker at håndtere linserne over en håndvask, skal du sikre dig, at afløbsåbningen er lukket til.

GB Recommendations for use

Guide to the use of your hard lenses

This leaflet contains important information; read it and keep it for future reference. Lenses are medical devices and must always be adjusted by a contact lens specialist. For correct use, it is important that you follow all the instructions given by your specialist and all the recommendations given on the packaging of your lenses and maintenance products.

INSTRUCTIONS:

Hard lenses are corneal lenses for daytime wear to correct short-sightedness, long-sightedness, astigmatism and presbyopia on regular or irregular corneas.

In children and young people under 20 years old, PRE AMYOPIC contact lenses can also slow down the progression of myopia.

RECOMMENDED RENEWAL:




Every 18 months

Every 12 months for contact lenses for children and young people.

PACKAGING:

The lenses are packaged in a mailer containing a decontaminant solution. It is fitted with a tamper-proof system until first opening. If packaging is damaged, do not use the lens.

The label provides the following information:

The lens brand name	
The name of its material	
The name and address of the manufacturer	
SN	The serial number
CE 0459	European conformity with health and safety requirements and certifying organisation number
	Expiry date
	Name of the solution preserver and expiry date
	Leaflet consultation
	not open if the packaging is damaged

PRECAUTIONS FOR USE

Your specialist will give you precise instructions on how to look after your lenses, put them in and take them out. Always wash and dry your hands thoroughly before putting your lenses in or taking them out. Never use damaged lenses. After use and before re-use, the lenses must be taken out, cleaned and decontaminated using the maintenance products your specialist has recommended. These lenses are designed to be worn by day; put them in the morning and take them out at night. The minimum recommended time for wearing PRE AMYOPIC lenses for them to be effective is 10 hours a day or more depending on physiological tolerance. Always take your lenses out before going to bed. If you do not wear your lenses for several days, refer to the information about your maintenance solution before re-using them. Always make sure you have your glasses with you (in case you find yourself obliged to take your lenses out). To avoid any alteration to the material or shape of your lenses, make sure you change them every 18 months or every 12 months for contact lenses for children and young people. Make sure that you attend the scheduled appointments with your practitioner; these are essential to monitor any changes.

PUTTING IN YOUR LENSES

Handling contact lenses entails a series of simple moves that should be done in respect of basic rules of hygiene.

- Before handling, hands must be washed, rinsed and dried on a clean, fluff-free towel.
- Put them in and take them out over a clean, flat, clear, well-lit surface.
- If you need to handle your lenses over a washbasin, make sure that the plug is in.
- To avoid any confusion between the right and left lens, it is best to always proceed in the same order: for example, first put the right lens in and then the left one.
- We recommend putting your lenses in after your morning wash and before putting make-up on; remove them after removing make-up and cleansing in the evening.
- **Place the lens on your index finger.**
- Use your middle fingers to open your eyelids
- Place the lens on the eye (figure 1). Repeat for the other eye.

TAKING OUT YOUR LENSES

First method

- Lean your head over a mirror placed flat on the table.
- Open your eyes very wide and stare at the mirror, slightly angling your head to the side of the eye concerned.
- Use your right index finger in the corner of your right eyelid and pull down at an angle, forcing yourself to keep your eyes wide open (figure 2)
- The lens will come unstick and fall onto the mirror.
- Repeat for the left lens.

Second method

- With your eyes wide open, place the index finger of one hand on the upper eyelid at the edge of the lashes and the index finger of the other hand on the lower eyelid, at the edge of the lashes. Now bring your two index fingers towards the centre, exerting gentle pressure on the edge of the eyelids to release the lens from the eye (figure 3).

MAINTENANCE

It is essential that you take care of your lenses. Always follow the instructions given on the maintenance products precisely. Decontaminate your lenses each time you take them out, to eliminate bacteria and be sure that you can continue wearing them comfortably, without risk.

Do not change the maintenance system your specialist has recommended.

Clean your container regularly, following the instructions given on the products used to maintain the lenses.

CONTRAINDICATIONS

Do not take any medications for eyes (eye drops or other ophthalmological products) without consulting your specialist.

Do not clean you lenses or container with tap water.

Do not use your saliva or any other household product to look after your lenses: only use the products recommended by your specialist.

Do not change brand of your maintenance product without consulting your specialist.

Do not allow your lenses to come into contact with lacquer or any other aerosol cosmetic product.

Do not leave your lenses in to sleep (see § precautions for use).

Do not wear your lenses in lying (having a bath or shower or if you are going to swim in a pool or the sea

Do not wear your lenses if exposed to dangerous fumes or irritants.

Pregnancy and some medications can cause tearing; talk to your specialist.

Wearing lenses is not recommended when you are suffering from an eye disorder and in very dry atmospheres (aeroplane, haidressers' hair-drying hood, etc.)

If you suffer from any of the following symptoms: irritated eye, redness, sensation of discomfort, watering eyes, a decline in sharpness of vision or poor sight, take the lens out and clean it. If discomfort persists, contact your specialist.

SIDE EFFECTS

The following possible side effects of lens wearing require you to stop wearing your lenses and consult a specialist:

- Irritated eye, discomfort, watering
- Vascularisation, abrasion, ulceration, abscess
- Photophobia

F Conseils d'utilisation

Guide d'utilisation de vos lentilles rigides

Ce livret contient des informations importantes, lisez-le et conservez-le pour de futures utilisations. Les lentilles sont des dispositifs médicaux et doivent toujours être adaptées par un spécialiste en lentilles de contact. Pour un usage correct, il est important que vous suiviez toutes les instructions de votre spécialiste et les conseils d'utilisation mentionnés sur l'emballage de vos lentilles et des produits d'entretien.

INDICATIONS :

Les lentilles rigides sont des lentilles cornéennes en port diurne pour le traitement de la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme et la presbytie sur des cornées régulières ou irrégulières.

Chez l'enfant et le jeune avant 20 ans, les lentilles PRE AMYOPIC peuvent permettre de freiner l'évolution de la myopie.

RENOUVELLEMENT CONSEILLÉ :




Tous les 18 mois.

Tous les 12 mois pour les lentilles destinées aux enfants et aux jeunes.

CONDITIONNEMENT :

Les lentilles sont conditionnées dans un mailer contenant une solution décontaminante. Il est équipé d'un système d'inviolabilité jusqu'à la première ouverture. Si le conditionnement est endommagé, la lentille ne doit pas être utilisée.

Sur l'étiquette sont mentionnées les informations suivantes :

Le nom commercial de la lentille	
Le nom de son matériau	
Les nom et adresse du fabricant	
SN	Le numéro de série
CE 0459	Conformité européenne aux exigences de santé et de sécurité et Numéro de l'organisme certicateur
	Date limite d'utilisation
	Nom du conservateur de la solution et sa date de péremption
	Consultation de la notice
	Ne pas ouvrir si conditionnement endommagé

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Votre spécialiste vous donnera toutes les instructions précises sur l'entretien de vos lentilles, leur pose et leur retrait. Lavez et séchez-vous toujours les mains soigneusement avant de mettre ou retirer vos lentilles. Ne mettez pas vos lentilles quand elles sont endommagées. Après usage et avant de les réutiliser, les lentilles doivent être retirées, nettoyées et décontaminées avec les produits d'entretien que votre spécialiste vous a recommandés. Ces lentilles sont destinées à être portées la journée : mettez-les le matin et retirez-les le soir. Le temps de port minimum recommandé pour une bonne efficacité des lentilles PRE AMYOPIC est de 10h par jour ou plus en fonction de la tolérance physiologique. Enlevez toujours vos lentilles avant de vous coucher. Si vous ne portez pas vos lentilles plusieurs jours, reportez-vous à la notice de votre solution d'entretien avant de les réutiliser. Ayez toujours avec vous des lunettes adaptées à votre vue (au cas où vous seriez obligé de retirer vos lentilles). **Pour éviter une altération du matériau ou de la géométrie de vos lentilles, il est primordial de les renouveler tous les 18 mois ou tous les 12 mois dans le cas de vos lentilles destinées aux enfants et aux jeunes.** Respectez les rendez-vous planifiés par votre praticien qui sont indispensables au contrôle et suivi de votre adaptation.

METTRE VOS LENTILLES

La manipulation des lentilles de contact est une succession de gestes simples qu'il convient d'effectuer en respectant certaines règles élémentaires d'hygiène.

- Avant chaque manipulation, les mains doivent être lavées, rincées, puis essuyées avec un linge propre et sans peluche.
- La pose et le retrait doivent se faire au-dessus d'une surface plane, propre et éclairée.
- Si vous devez manipuler vos lentilles au-dessus d'un lavabo, assurez-vous que l'orifice d'évacuation soit bouché.
- Afin d'éviter toute confusion entre la lentille droite et la lentille gauche, il est conseillé de procéder toujours dans le même ordre : par exemple en premier la lentille droite puis la lentille gauche.
- Il est recommandé de mettre ses lentilles après la toilette du matin avant le maquillage et de les ôter avant la toilette du soir et le démaquillage.

- **Placez la lentille sur votre index.**
- Utilisez le majeur d'une main et celui de l'autre main pour ouvrir les paupières
- Mettez la lentille sur l'œil (figure 1). Répétez cette procédure pour l'autre œil.

ENLEVER VOS LENTILLES

Première méthode

- Penchez la tête au-dessus du miroir posé à plat sur la table.
- Ouvrez très grand les yeux et regardez fixement dans la glace en tournant légèrement la tête du côté de l'œil concerné.
- Avec l'index droit placé dans l'angle temporal des paupières droites, tirez dans l'axe de celles-ci en vous efforçant de maintenir les yeux grands ouverts (figure 2)
- La lentille se décolle et tombe sur le miroir.
- Pour la lentille gauche procédez de façon identique.

Deuxième méthode

- Les yeux grands ouverts, placez l'index d'une main sur la paupière supérieure au bord des cils, l'index de l'autre main sur la paupière inférieure au bord des cils et rapprochez vos deux index vers le centre en exerçant une légère pression sur le bord des paupières pour décoller la lentille de l'œil (figure 3)

ENTRETIEN

Il est essentiel de bien entretenir vs lentilles. Suivez toujours précisément les instructions des produits d'entretien. Décontaminez vos lentilles chaque fois que vous les enlevez pour éliminer les bactéries et pour être sûr de les porter confortablement et sans risque. Ne changez pas le système d'entretien que votre spécialiste vous a recommandé. Nettoyez régulièrement votre étui selon les indications des produits utilisés pour l'entretien des lentilles

CONTRE-INDICATIONS

Ne prenez pas de médicaments pour les yeux (collyre ou tout autre produit ophtalmique) sans consulter votre spécialiste. Ne nettoyez pas vos lentilles ou votre étui à l'eau du robinet.

N'utilisez ni votre salive ni aucun produit ménageur pour l'entretien de vos lentilles : utilisez uniquement les produits recommandés par votre spécialiste.

Ne changez pas la marque de votre produit d'entretien sans consulter votre spécialiste.

Ne mettez pas vos lentilles en contact avec de la laque ou toute autre produit cosmétique en aérosol.

Ne gardez pas vos lentilles pour dormir (voir § précautions d'utilisation).

Ne portez pas vos lentilles si vous prenez un bain ou une douche ou si vous allez vous baigner en piscine ou en mer

Ne portez pas vos lentilles si vous êtes exposé aux fumées dangereuses ou irritantes.

La grossesse ainsi que certains médicaments peuvent perturber la sécrétion lacrymale : parlez-en à votre spécialiste
Le port des lentilles est déconseillé en cas de pathologie oculaire et dans des atmosphères de faible hygrométrie (avion, casque chez le coiffeur...)

Si vous constatez les symptômes suivants : œil irrité, rouge, sensation d'inconfort, larmoiement, chute d'acuité ou mauvaise vision ...retirez la lentille et nettoyez-la. Si la gêne persiste consultez votre spécialiste

EFFETS SECONAIRES

Effets secondaires possibles pour tout port de lentilles nécessitant l'arrêt du port des lentilles et la consultation d'un spécialiste :

- Cœil irrité, sensation d'inconfort, larmoiement
- Vascularisation, abrasion, ulcération, abcès
- Photophobie

D Anwendungshinweise

Gebrauchsanweisung für Ihre formstabilen Kontaktlinsen

Diese Broschüre enthält wichtige Informationen. Lesen Sie sie durch und heben Sie sie für künftigen Gebrauch auf. Kontaktlinsen sind Medizinprodukte und müssen stets von einem Kontaktlinsenspezialisten angepasst werden. Für den richtigen Gebrauch ist es wichtig, dass Sie alle Anweisungen Ihres Spezialisten sowie die Hinweise aus der Gebrauchsanweisung auf der Verpackung Ihrer Linsen und der Pflegeprodukte befolgen.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Formstabile Kontaktlinsen sind Kontaktlinsen, die zur Behandlung von Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Hornhautverkrümmung und Alterssichtigkeit bei gleichmäßiger oder ungleichmäßiger Hornhaut tagsüber zu tragen sind.

Bei Kindern und Jugendlichen unter 20 Jahren können Kontaktlinsen von PRE AMYOPIC die Entwicklung von Kurzsichtigkeit hemmen.

EMPFOHLENES AUSTAUSCHINTERVALL:




Alle 18 Monate

Alle 12 Monate bei Kontaktlinsen für Kinder und Jugendliche.

VERPACKUNG:

Die Kontaktlinsen sind in einer Konservierungslösung verpackt. Die Verpackung ist bis zum ersten Öffnen mit einem Sicherheitssystem geschützt. Wenn die Verpackung beschädigt ist, darf die Kontaktlinse nicht verwendet werden.

Auf het etiket staan de volgende informatieen zo vinden:

Handelsname der Linse	
Bezeichnung des Materials	
Name und Adresse des Herstellers	
SN	Seriennummer
CE 0459	CE-Kennzeichnung für Konformität mit den europäischen Anforderungen für Gesundheit und Sicherheit sowie Nummer der Zertifizierungsstelle
	Verfallsdatum
	Bezeichnung und Verfallsdatum der Konservierungslösung
	Lesen der Gebrauchsanwegung
	Nicht öffnen, wenn die Packung beschädigt ist

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER ANWENDUNG

Ihr Spezialist gibt Ihnen alle genauen Anweisungen zur Pflege, zum Einsatz und zum Herausnehmen Ihrer Kontaktlinsen. Waschen und trocknen Sie sich stets gründlich die Hände, ehe Sie Ihre Kontaktlinsen einsetzen oder herausnehmen. Setzen Sie keine beschädigten Linsen ein. Nach Gebrauch und vor erneutem Einsetzen müssen die Linsen entnommen, gereinigt und mit den Pflegeprodukten desinfiziert werden, die Ihr Spezialist Ihnen empfiehlt. Diese Kontaktlinsen sind zum Tragen tagsüber gedacht: Setzen Sie sie morgens ein und nehmen Sie sie abends wieder heraus. Für gute Wirksamkeit beträgt die empfohlene Mindesttragezeit von PRE AMYOPIC-Kontaktlinsen 10 Stunden täglich oder mehr, je nach physiologischer Verträglichkeit. Nehmen Sie Ihre Linsen vor dem Schlafengehen immer heraus. Wenn Sie Ihre Kontaktlinsen über mehrere Tage hinweg nicht tragen, dann lesen Sie in der Packungsbeilage Ihrer Pflegelösung nach, ehe Sie sie wieder einsetzen. Tragen Sie stets eine Brille in Ihrer Stuhkühle bei sich (für den Fall, dass Sie Ihre Kontaktlinsen herausnehmen müssen). **Um eine Veränderung des Materials oder der Geometrie Ihrer Kontaktlinsen zu vermeiden, ist es sehr wichtig, diese alle 18 Monate auszutauschen oder alle 12 Monate bei Kontaktlinsen für Kinder und Jugendliche.** Halten Sie die geplanten Termine bei Ihrem Spezialisten ein, denn diese sind zur Kontrolle und Nachbeobachtung sehr wichtig.

EINSETZEN IHRER LINSEN

Die Kontaktlinsen werden in einer festen Reihenfolge einfacher Handgriffe gehandhabt, die dabei hilft, bestimmte elementare Hygieneregeln einzuhalten.

- Vor jeder Handhabung müssen die Hände gewaschen, abgespült und dann mit einem sauberen und fusseltreien Tuch getrocknet werden.
- Das Einsetzen und Herausnehmen muss über einer ebenen, sauberen und freien Oberfläche erfolgen.
- Wenn Sie Ihre Linsen über einem Waschbecken handhaben müssen, achten Sie darauf, dass der Abfluss verschlossen ist.
- Um eine Verwechslung der rechten und der linken Linse zu vermeiden, sollte immer in derselben Reihenfolge vorgegangen werden: zuerst beispielsweise immer die rechte Linse und dann die linke.
- Es wird empfohlen, die Linsen nach der Morgentoilette und nach dem Schminken einzusetzen und vor der Abendtoilette sowie vor dem Abschminken wieder herauszunehmen.
- **Legen Sie die Kontaktlinse auf Ihren Zeigefinger.**
- Öffnen Sie die Augenlider mit dem Mittelfinger jeder Hand
- Setzen Sie die Linse ins Auge ein (Abbildung 1). Wiederholen Sie dieses Verfahren beim zweiten Auge

HERAUSNEHMEN IHRER LINSEN

Erste Methode

- Neigen Sie den Kopf über einen flach auf dem Tisch liegenden Spiegel.
- Öffnen Sie die Augen ganz weit und blicken Sie starr in den Spiegel, während Sie leicht den Kopf in Richtung des betroffenen Auges neigen.
- Mit dem rechten Zeigefinger an der Schläfenseite der rechten Augenlider ziehen Sie nach außen, halten aber gleichzeitig das Auge weit geöffnet (Abbildung 2).
- Die Kontaktlinse löst sich und fällt auf den Spiegel.
- Bei der linken Linse verfahren Sie genauso.

Zweite Methode

- Öffnen Sie die Augen weit, legen Sie den Zeigefinger einer Hand direkt über den Wimpernrand des Oberlids und den Zeigefinger der anderen Hand direkt unter den Wimpernrand des Unterlids, bewegen Sie die beiden Zeigefinger zur Mitte aufeinander zu und üben Sie dabei leichten Druck auf die Lidränder aus, um die Linse vom Auge zu lösen (Abbildung 3)

PFLEGE

Es ist sehr wichtig, Ihre Linsen gut zu pflegen. Befolgen Sie stets genau die Anweisungen zum Pflegeprodukt. Desinfizieren Sie Ihre Kontaktlinsen jedes Mal, wenn Sie sie herausnehmen, um Bakterien zu entfernen und um für ein komfortables und risikofreies Tragen zu sorgen. Wechseln Sie nicht das Pflegesystem, das Ihr Spezialist Ihnen empfohlen hat.

Reinigen Sie regelmäßig Ihren Aufbewahrungsbehälter nach den Anweisungen Ihrer Kontaktlinsenpflegeprodukte.

GEGENANZEIGEN

Nehmen Sie keine Augenmedikamente (Augentropfen oder andere medizinische Produkte fürs Auge), ohne Ihren Spezialisten zu fragen.

Reinigen Sie Ihre Kontaktlinsen oder Ihren Aufbewahrungsbehälter nicht mit Leitungswasser.

Verwenden Sie weder Speichel noch irgendeinige Haushaltsprodukte zur Pflege Ihrer Kontaktlinsen. Verwenden Sie ausschließlich die Produkte, die Ihr Spezialist Ihnen empfiehlt.

Wechseln Sie nicht die Marke Ihrer Pflegeprodukte, ohne Ihren Spezialisten zu fragen.

Bringen Sie Ihre Kontaktlinsen nicht in Kontakt mit Haarspray oder anderen Kosmetikprodukten aus dem Zerstäuber.

Tragen Sie Ihre Kontaktlinsen nicht beim Schlafen (siehe „Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung“).

Tragen Sie Ihre Kontaktlinsen nicht beim Baden oder Duschen, auch nicht beim Baden im Schwimmbad oder in Gewässern.

Tragen Sie Ihre Linsen nicht, wenn Sie gefährlichem oder reizendem Rauch ausgesetzt sind.

Eine Schwangerschaft und bestimmte Medikamente können die Tränenproduktion beeinträchtigen: Sprechen Sie darüber mit Ihrem Spezialisten.

Das Tragen von Kontaktlinsen wird nicht empfohlen bei Augenerkrankungen sowie bei sehr trockener Umgebungsluft (Flugzeug, Trockenhaube beim Friseur...)

Wenn Sie folgende Symptome feststellen: Augenreizung, Rötung, unangenehmes Gefühl, Tränenfluss, Rückgang der Sehschärfe oder schlechtes Sehen... , nehmen Sie die Kontaktlinse heraus und reinigen Sie sie. Wenn das Problem weiterbesteht, wenden Sie sich an Ihren Spezialisten.

NEBENWIRKUNGEN

Folgende Nebenwirkungen sind durch das Tragen der Kontaktlinsen möglich, die es erforderlich machen, das Tragen der Linsen einzustellen und einen Spezialisten aufzusuchen:

- Augenreizung, unangenehmes Gefühl, Tränenfluss
- Vaskularisation, Abrasion, Geschwürbildung, Abszess
- Photophobie

NL Advies voor veilig gebruik

Gebruikershandleiding voor uw harde lenzen

Dit boekje bevat belangrijke informatie, lees het zorgvuldig door en bewaar het voor toekomstig gebruik. De lenzen zijn medische hulpmiddelen en moeten altijd door een specialist in contactlenzen worden aangepast. Voor correct gebruik is het belangrijk dat u alle instructies van uw specialist en de gebruiksaanwijzing op de verpakking van uw lenzen en onderhoudsproducten volgt.

INDICATIES:

De vormstabiele of harde lenzen zijn contactlenzen voor gebruik overdag voor de behandeling van bijziendheid, verziendheid, astigmatisme en presbyopie op regelmatige of onregelmatige hoornvliezen.

Bij kinderen en jongeren onder de 20 jaar kunnen de PRE AMYOPIC-lenzen de progressie van bijziendheid remmen.

AANBEVOLEN VERNIEUWING




Iedere 18 maanden

Om de 12 maanden voor lenzen voor kinderen en jongeren.

VERPAKKING:

De lenzen zijn verpakt in een lenzenhouder met een ontsmettingsoplossing. Deze is voorzien van een verzegelingstelsysteem tot de eerste opening. Als de verpakking beschadigd is, mag de lens niet worden gebruikt.

Op het etiket staat de volgende informatie:

Het handelsmerk van de lens	
De naam van het materiaal	
De naam en adres van de fabrikant	
SN	Het serienummer
CE 0459	Voldoet aan de Europese veiligheids- en gezondheids Eisen. Het nummer van de certificatie-instelling
	Uiterste gebruiksdatum
	Naam van het conserveermiddel van de oplossing en de vervaldatum
	Raadpleging van de bijsluiter
	Een beschadigde verpakking mag niet worden geopend.

VOORZORGSMAATREGENEN VOOR GEBRUIK

Uw specialist zal u alle nauwkeurige instructies geven over het onderhoud van uw lenzen en over het inzetten en uitnemen ervan. Was en droog uw handen altijd zorgvuldig voordat u uw lenzen inzet of uitneemt. Doe uw lenzen niet in wanneer ze beschadigd zijn. Na gebruik en voor ze weer opnieuw te gebruiken, moeten de lenzen worden verwijderd, schoongemaakt en ontsmet met de reinigingsproducten die uw specialist u heeft aanbevolen. Deze lenzen zijn bedoeld om overdag te worden gedragen: zet ze 's ochtends in en neem ze 's avonds uit. De aanbevolen minimale draagtijd voor een goede efficiëntie van PRE AMYOPIC-lenzen is 10 uur per dag of meer, afhankelijk van de fysiologische tolerantie. Verwijder altijd uw lenzen voordat u naar bed gaat. Als u uw lenzen enkele dagen niet draagt, raadpleeg dan de bijsluiter van uw onderhoudsoplossing voordat u ze opnieuw gebruikt. Neem altijd een aan uw zicht aangepaste bril mee (voor het geval u uw lenzen moet uitnemen). **Om te voorkomen dat het materiaal of de geometrie van uw lenzen verandert, is het essentieel om ze elke 18 maanden te vernieuwen of om de 12 maanden in het geval van lenzen voor kinderen en jongeren.** Respecteer de geplande afspraken met uw arts die essentieel zijn voor de controle en de follow-up van uw aanpassing.

UW CONTACTLENZEN INZETTEN

De hantering van contactlenzen bestaat uit een serie eenvoudige gebaren die moeten worden uitgevoerd met inachtneming van een aantal basisregels voor een goede hygiëne.

- Vóór elke hantering van de lenzen moet u u handen zorgvuldig wassen, afspoelen en daarna afdrogen met een schone, pluisvrije doek.
- Het inzetten en uitnemen moet gebeuren boven een vlak, schoon en verlicht oppervlak.
- Als u uw lenzen boven de wastafel moet hanteren, zorg ervoor dat het afloopgat dicht zit.
- Om elke verwaring tussen de rechter en linker lens te vermijden, is het raadzaam om altijd in dezelfde volgorde te werk te gaan: bijvoorbeeld zet eerst de rechter lens in en vervolgens de linker lens.
- Het wordt aanbevolen om de lenzen in te zetten na het maken van uw toilet 's ochtends en voor u zich opmaakt, en de lenzen uit te nemen voor het maken van uw toilet 's avonds en voor u de make-up van uw gezicht afhaalt.
- **Plaats de lens op uw wijsvinger.**
- Gebruik uw middelvinger van de ene hand en die van de andere hand om uw oogleden te openen.
- Zet de lens op uw oog (figuur 1). Herhaal dezelfde procedure voor uw andere oog.

UW CONTACTLENZEN UITNEMEN

Eerste methode

- Buig uw hoofd voorover boven een spiegel die plat op de tafel ligt.
- Maak uw ogen groot en kijk recht in de spiegel terwijl u uw hoofd zachtjes naar de kant van het desbetreffende oog draait.
- Met uw rechter wijsvinger geplaatst in de temporale hoek van de rechter oogleden, trek de lens in de richting van de oogleden terwijl u probeert om u open wijid open te houden (figuur 2).
- De lens komt